

Vix-Mask

**Módní maska z tekutého
lékařského silikonu**

Produktový manuál



**Filtr produkovaný
v čistém prostředí
a sterilizovaný
ethylen oxidem**

(Ilustrační obrázek)

Informace o puktu

Představení výrobku:

Děkujeme, že jste si zakoupili masku řady M1205. Před použitím masky si přečtěte celý návod.

Naše obličejové masky řady M1205 jsou vyrobeny z vysoce kvalitní textilní tkaniny a tekutého silikonu slékařským odstupňováním, navrženého tak, aby byl stylový, odolný vůči filtrům, přenosný, prodyšný a pohodlný. V sérii je několik modelů a tato příručka by se mohla vztahovat na každý model.

Filtry používající módní masky řady M1205 jsou plně vyráběny v čisté místnosti a jsou sterilizovány ethylenoxidem, aby poskytovaly ochranu na úrovni lékařských stupňů masek. Další informace o sterilizaci filtru naleznete níže.

Funkce masky

Tento produkt funguje jako ochranná maska, která může filtrovat částice, jako jsou vlasy, vlákna, pyl, prach atd. V obecně znečištěném prostředí.

Obecná varování

1. Tato maska neprodukuje kyslík, proto NEMŮŽE být používána v anoxickém prostředí
2. Pokud pocítíte závratě, nevolnost nebo nežádoucí reakci při používání masky, přestaňte ji používat
3. Zlikvidujte a vyměňte filtr a masku pravidelně čistěte, jakmile na filtru dojde ke znečištění nebo ke snížení průtoku vzduchu maskou.

Části masky



Popruh na uši | Filtr | Nastavitelný kroužek


Maska




Maska po složení

Složení a přizpůsobení

1, Složení masky

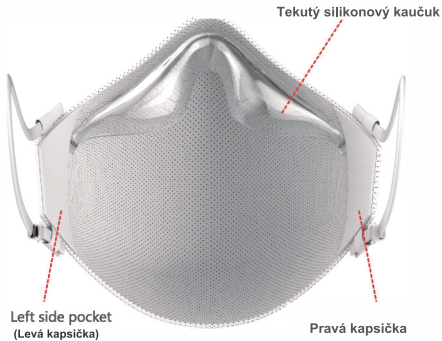

Maska

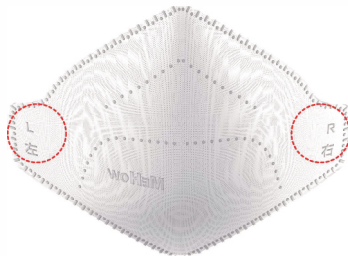


Filtr

1. Rozviňte masku
2. Vložte filtr do levé a pravé kapsy masky

2, Oblékání masky



3. Před použitím se ujistěte, že jste sestavili a zarovnali filtry ve správné poloze

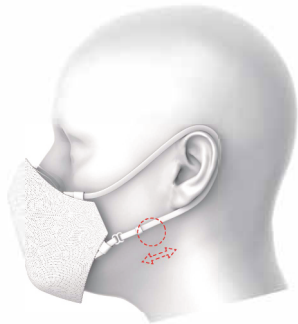

0

Upravte délku popruhů na uši




e

Upravte tvarovací proužek tak,
abyste dosáhli co nejlepšího
těsnícího účinku



3

Vzhled předního nošení

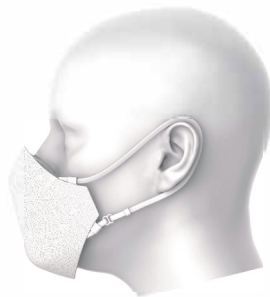

4

Vzhled na boku

Demontáž

Vyjměte filtr z masky z obou bočních kapes, doporučuje se masku skladovat na suchém a větraném místě, aby nedošlo k případnému zápachu.

Čištění a údržba

Maska

1. Je normální, že maska po použití kondenzuje. Otřete jej čistým hadříkem.
2. Ruční mytí textilní části, Pokud je povrch vyšíván filtry nebo jinými ozdobami, namísto tření opláchněte masku.
3. Očistěte odolné skvrny měkkým kartáčem a neutrálním čisticím prostředkem a opláchněte je čistou vodou, jinak by některé zbytky mohly poškodit masku nebo zanechat škodlivé zbytkové páry, které by se mohly vdechnout.
4. Dobře opláchněte a nechte je uschnout na vzduchu mimo přímé sluneční světlo.
5. Doporučuje se požádat o profesionální péči a údržbu kůže nebo jiných speciálních materiálů.

Filtr:

1. Filtr zlikvidujte a vyměňte pravidelně, jakmile dojde ke zvýšení znečištění nebo odporu proudu vzduchu. Nedoporučuje se čištění a opětovné použití starého filtru.
2. Filtry byly sterilizovány ethylenoxidem, doba expirace filtru je 3 roky v dobrém stavu balení.

Ostatní

1. Pokud je zjevné zhoršení obličejové masky (praskání, trhání, uvolnění atd.), zlikvidujte a vyměňte komponentu.
2. Masky jsou výrobky osobní hygieny a nedoporučuje se sdílet s ostatními.

Řešení problémů

	Problém	Potencionální příčina	Řešení
1.	Ušní smyčky jsou volné a maska klesá z obličeje	1. Sluchátko není nastaveno na správnou délku 2. Upevňovací část na ušním krytu je nesprávná	1. Upravte délku ušní smyčky 2. Změňte včas novou masku
2.	Je obtížné dýchat	1. Filtr je příliš vlhký 2. Filtr je znečištěný	Vyměňte filtr

Specifikace

Čistá váha: 20g - 50g (Záleží na designu)

Hlavní materiál: textil, tekutý silikon

Velikost: Univerzální

Skladovací a transportní teploty: -20 °C až 40 °C

Skladovací a transportní vlhkost: 0% - 95%

Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace produktu a může se změnit bez předchozího upozornění

Skladování

Před uskladněním masky se ujistěte, že je maska důkladně čistá a suchá. Masku skladujte na suchém a větraném místě mimo přímé sluneční světlo.

Likvidace

Tato maska neobsahuje žádné nebezpečné látky a může být zlikvidována běžným způsobem v domácnosti.

Vysvětlení identifikačních značek



Teplotní limit



Limity vlhkosti



Sterilizováno Ethylenoxidem

Příslušenství

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Maska 1x | 2) Sterilizovaný filtr 2x |
| 3) Uživatelský manuál 1x | |

Dodatek:Úvod do sterilizace filtru

1) O sterilizaci ethylenoxidem

Ethylenoxid se běžně používá pro sterilizaci lékařských nástrojů, účinně ničí širokou škálu bakterií, které mohou způsobit respirační infekce.

2) Standard provádění sterilizace

Filtr sterilizovaný ethylenoxidem splňuje požadavky mikrobiálních indikátorů ve standardu GB19083-2010 „Technické požadavky na lékařské ochranné masky“.

Balení filtrů

Filtr je balen v balení sterilizovaném ethylenoxidem, obal bude označen nálepkou chemického indikátoru sterilizace ethylenoxidu. Štítek s červenou



Před sterilizací

Po sterilizaci

Před sterilizací bude filtr tepelně utěsněn a po sterilizaci bude pokračovat v konečném balení. Všechny procesy jsou prováděny v čisté lékařské místnosti.



Doba skladování

Doba platnosti filtru sterilizovaného ethylenoxidem je 3 roky, pokud není obal otevřen.

Průvodce rozbalením filtru

Před vybalením se ujistěte, že je chemický štítek se sterilizací ethylenoxidu modrý, což znamená, že filtr byl sterilizován a lze jej použít.

Doporučuje se použít nůžky nebo jiné nástroje k oříznutí vaku pod okrajem utěsněné oblasti, aby nedošlo k náhodnému oříznutí filtru.

