

Technický manuál masky

PM2.5 Mask
Manuál

Manuál na použití masky
PM2.5



Instrukce k produktu

Použí produkt

Výrobek je ochranná maska, která může filtrovat částice (menší nebo rovnající se 2,5 µm) v ovzduší znečištěného prostředí. Může účinně filtrovat zákal, nečistoty, prach, pyl, bakterie a další částice. Pro bezpečné a efektivní používání tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte a řiďte se pokyny.

Pozor! Omezení použití

- 1. Tento produkt neprodukuje kyslík, proto NEMŮŽE být používán v anoxickém prostředí.
- 2. Tento produkt NESMÍ být používán k ochraně před toxickými plyny.
- 3. Pokud během používání pociťujete závratě, nevolnost nebo jiné nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat.
- 4. Pokud je filtrační vložka znečištěná nebo máte pocit respiračního odporu, vyměňte filtrační vložku.


Specifikace produktu

Jméno výrobku: PM2.5 Tech Mask (Tech Series)
Váha produktu: asi 100g
Hlavní materiál: Silikon pro lékařské účely
Velikost: Free size (F)
Úroveň ochrany: GB/T 32610-2016, Třída ochrany B

/ Obsah balení


Maska : 1 ks	Držák filtrační vložky: 1 ks
Zásobník filtrů: 2 ks Silikonový	Čelenka: 1 pár
ušní háček : 1 pár	Utěrka: 1 ks
Přenosný vak: 1 ks	Návod k použití: 1 kopie

/ Způsob aplikace

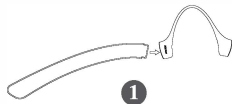


1

Před upevněním prosím otevřete koženou stranu čelního popruhu.

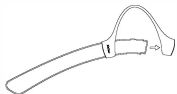


e

Vložte ušní háček ze strany s potiskem loga na druhou stranu.

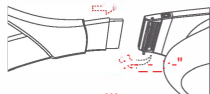


0

Otevřete kovovou přitlačnou desku a zabalte čelní pás do hlavní části masky (Zajistěte kryt látky dovnitř).

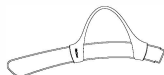

3


Nastavte háček do vhodné polohy.

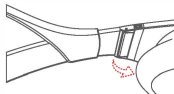

5


Zavřete kovovou desku a sponu čelenky.

/ Sestavení filtrační vložky

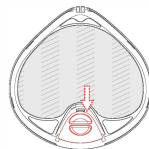


0

Zatlačte západku zámku dolů.

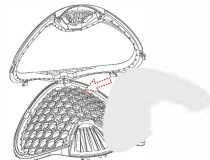


3

Otočením otevřete držák filtrační vložky.

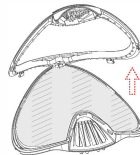

e


Otočením otevřete držák filtrační vložky.

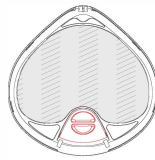

0

Otočením otevřete držák filtrační vložky.

/ Nošení masky

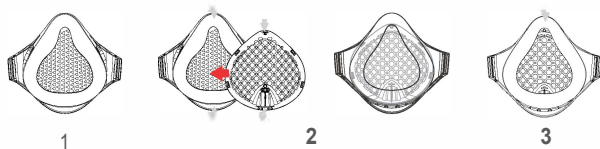

O Otočte masku, abyste mohli vložit filtr

e Vložte celou filtrační kazetu do silikonové masky.

e Zarovnejte bod filtrační vložky se silikonovým bodem a celou kazetu vložte do silikonové drážky.

/ Sestavení filtrační jednotky

O Před nasazením masky nastavte ušní háček do správné polohy.

e Nasadte nosní část masky nahoru a přikryjte jí bradu a seřídte ušní háčky a zapněte suchý zip

e Po výše uvedených krocích se doporučuje provést plynotěsnou

zkoušku: položte ruce na masku, pokud při výdechu pociťujete únik vzduchu, proveďte opětovné seřízení podle kroků 1 a 2.



Correct wear

/ Čištění a údržba

Čištění

1. Drsněte vodou.
2. V případě přetrvávajících skvrn použijte měkký kartáč a neutrální čisticí prostředek.
3. Doporučuje se masku čistit každé jeden nebo dva dny a přirozeně suchou, aby byla čistá.
4. Doporučuje se přenosný vak čistit každé jeden nebo dva dny, aby byl čistý.

/ Pozor!

Filtrační patrona je filtrační vrstva masky patřící ke spotřebnímu materiálu. Pokud je znečištěný, zlikvidujte jej jako odpad z domácnosti a nahraďte jej novým.

/ Skladování:

Doporučuje se masku uchovávat na suchém, větraném místě a okolní teplotě, vyhýbat se přímému slunečnímu záření.

/ Vysvětlení značek



/ Dodatek: Úvod do sterilizace filtru

1) O sterilizaci ethylenoxidem

Ethylenoxid se běžně používá pro sterilizaci lékařských nástrojů, účinně ničí širokou škálu bakterií, které mohou způsobit respirační infekce.

2) Standard provádění sterilizace

Filtr sterilizovaný ethylenoxidem splňuje požadavky mikrobiálních indikátorů ve standardu GB19083-2010 „Technické požadavky na lékařské ochranné masky“.

/ Balení filtrů

Filtr je balen v balení sterilizovaném ethylenoxidem, obal bude označen nálepkou chemického indikátoru sterilizace ethylenoxidu. Před sterilizací označte červenou barvou, po sterilizaci modrou barvou.



Před sterilizací

Po sterilizaci

Před sterilizací bude filtr tepelně utěsněn a po sterilizaci bude pokračovat v konečném balení. Všechny procesy jsou prováděny v čisté lékařské místnosti.



/ Doba platnosti filtru skladování

Doba platnosti filtru sterilizovaného ethylenoxidem je 3 roky, pokud není obal otevřen.

/ Průvodce rozbalením filtru

Před vybalením se ujistěte, že je chemický štítek se sterilizací ethylenoxidu modrý, což znamená, že filtr byl sterilizován a lze jej použít.

Doporučuje se použít nůžky nebo jiné nástroje k oříznutí vaku pod okrajem utěsněné oblasti, aby nedošlo k náhodnému oříznutí filtru.

